



2023年6月1日

各位

会社名 株式会社メニコン
代表者名 代表執行役社長 COO 川浦 康嗣
(コード番号：7780 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 執行役 経営統括本部長 渡邊 基成
(TEL. 052-935-1646)

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤『エピカ スマートクリーン』

新発売のお知らせ

当社は、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤『エピカ スマートクリーン』を、2023年6月1日（木）より、定額制「メルスプラン」におけるケア用品宅配サービス「ケアプラス」にて取り扱いを開始いたしますことをお知らせいたします。また、7月以降に順次、通常販売を開始いたします。

本件に関する詳細につきましては、別紙ニュースリリースをご参照ください。

以上

2023年 6月 1日


“しっかり消毒、瞳にもやさしい” ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 「エピカ スマートクリーン」新発売！



株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、代表執行役社長 COO：川浦康嗣）は、2023年6月1日（木）から、ソフトコンタクトレンズ用消毒剤『エピカ スマートクリーン』をメルスプランケア用品宅配サービス「ケアプラス」にて取り扱いを開始いたします。

これまでソフトコンタクトレンズユーザーの多くの方が、ケアを煩わしいと感じているのが現状でした。そこで、「コンタクトレンズのお手入れは面倒、でもきちんとケアはしたい」そんなお悩みを解決したいという思いで生まれたのが、『エピカ スマートクリーン』です。


多くの方がケアを煩わしいと感じています

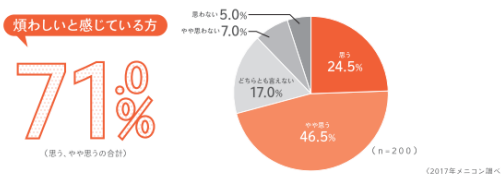

1. 製品特長

①簡単：使いやすさにこだわったスマートケース

メニコン独自のバスケットで、開閉しやすい設計。中和剤を入れたりする手間もなく、ケアの煩わしさを解消します。

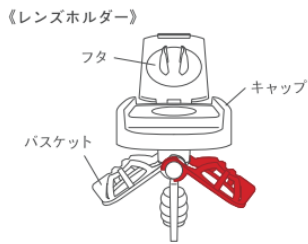

《中和ケース》




エピカ スマートクリーンの簡単ステップ

① のせて ② 入れて ③ とじる

②清潔：レンズ内面にふれずに取り出せるスマートタッチ仕様


SMART TOUCH

レンズを取り出す際に、レンズ内面にふれにくく清潔・簡単に装用できるデザインを採用しています。
 ※レンズの内面が内側になるようにレンズをセットしてください。

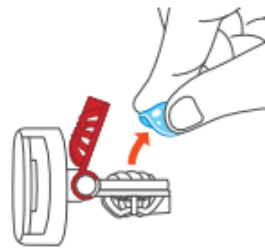

③安全：瞳の安全を考えたロックノズル

中和前のエピカ スマートクリーン（過酸化水素）は強い眼刺激の原因になります。スマートケースに押し込むことで液が出るロックノズルにより、エピカ スマートクリーンでレンズをすすいでしまう誤使用を防ぎます。

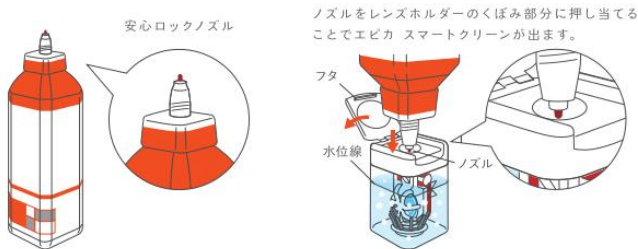


④しっかり消毒、瞳にもやさしい

過酸化水素がしっかり消毒。ISO14729 に準拠し、各社ソフトコンタクトレンズ用ケア用品の消毒効果試験を実施したところ、エピカ スマートクリーンは高いレベルの消毒効果を発揮しました。また、生物学的安全性の指標の一つである細胞毒性についても、エピカ アクアモアと同様、細胞毒性が低いことを確認しています。

⑤優れた洗浄力

酸素の泡とクエン酸が汚れをスッカリ落とします。

タンパク汚れの洗浄メカニズム

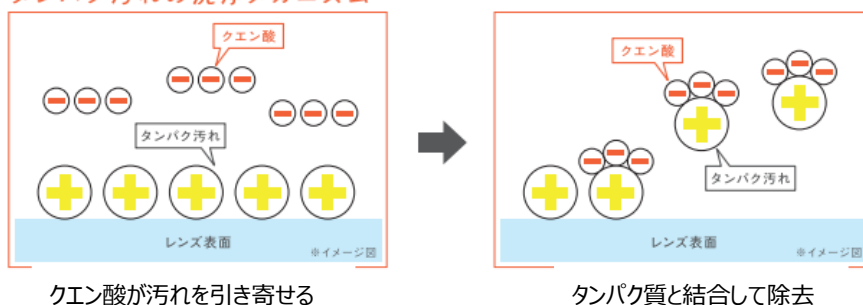

⑥うるおいキープ処方

レンズの内側から潤う技術を採用。保湿成分がレンズ内部にしみこんでうるおいをキープします。

※うるおい感には個人差があります。

2.製品概要

| | |
|---------|------------------------------------|
| 販売名 | エピカ スマートクリーン |
| 承認番号 | 30300DZX00412000 |
| 用途 | ソフトコンタクトレンズ用消毒剤（医薬部外品） |
| 効能又は効果 | ソフトコンタクトレンズ（グループ I ～IV）の消毒 |
| 有効成分 | 【消毒液】過酸化水素 3.42w/v% 【中和樹脂】白金 1.0mg |
| 配合成分 | 安定剤、緩衝剤、湿潤剤、pH 調整剤、等張化剤 |
| 使用期限 | 外箱・ボトル側面に印字 ※開封後の使用期限は3ヵ月 |
| 消毒・中和時間 | 6時間以上 |
| 容量 | ケアプラス：240mL、販売用：300mL |

3.販売・プロモーション

- 『エピカ スマートクリーン』は全国の本メスプラン加盟施設にて、順次販売を開始いたします。また、通常販売につきましては、7月以降順次開始いたします。
- ・価格 メスプラン ケアプラス月額費用：770円（税込）
販売用：オープン価格

◆「エピカ スマートクリーン」ブランドサイト

https://www.menicon.co.jp/products/care/e_smartclean/